




ベビースケールは硬く平らな安定した場所で使用してください。
じゅうたんや畳の上では正確に計測できません。
温度変化の激しい状況では測定値に誤差が生じたり、液晶画面が正常に
表示されない可能性があります。特に夏場の配達直後は、本体が高温に
なっていることがありますので数時間放置してからご使用ください。

seca 382

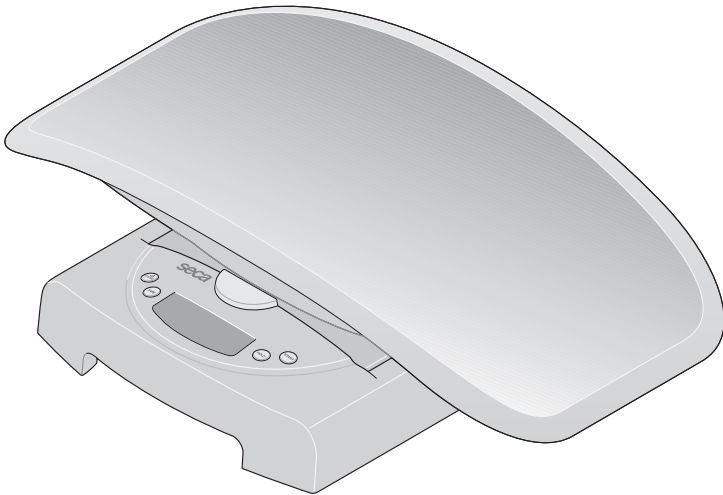

当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

ナイスベビー
Nice
Baby

株式会社ベビーリース

〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158-19

TEL 047-392-1234

1. お買い上げいただき、 ありがとうございます！

購入いただいたこのデジタルベイスケール **seca 382** は、高精度でしかも頑丈な製品です。

150 年以上にわたってseca社は健康関連の事業で経験を重ね、マーケットリーダーとして世界各国で計量と測定向けの先進的開発によって、新たな基準を打ち

立て続けています。


このデジタルベイスケール **seca 382** は各国の規定に準拠した上で、主に病院、診療所、長期医療看護施設などで使用されています。本機器は、出生時体重の測定や成長過程での体重増加のチェックにも役立ちます。

2. 安全について


- 取扱説明書に記載されている注意事項を守ってください。
- 取扱説明書および適合宣言書は大切に保管してください。
- 乳児から目を離さずにスケールに載せてください。
- スケールは傾斜のない平面上に安全な状態で置いてください。
- スケールを落としたり、スケールに強い衝撃を与えたりしないでください。
- 必ず指定されている型式の電池をご使用ください（2 ページの「電力供給」を参照）。
- 修理は必ず有資格者に行わせてください。
- 定期的な保守を依頼してください（6 ページの「保守」を参照）。

3. ご使用になる前に

電力供給

本機器の電力供給は電池で行われます。液晶ディスプレイの電流消費はごくわずかです。電池 1 セットで約 1,000 回の計量を行うことができます。ディスプレイに  または **bAt** が表示されたら、電池を交換してください。6 本の単三電池（1.5 V）が必要です。


- 乳児測定用トレイを取り外し、スケールを慎重に裏返して、スケールの底面を表に向けます。

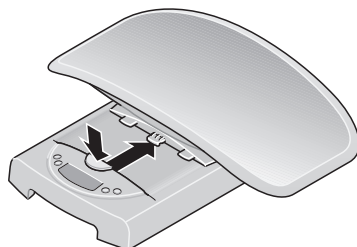

- 電池ケースのフタを開け、付属の電池を極性表示に合わせて電池ケースに入れます。


極性を間違えないようにしてください！

- 電池ケースのフタを慎重に閉めます。

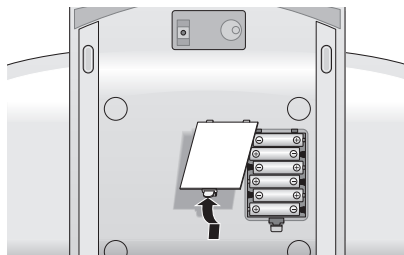

4. スケールを設置する

- 本機器を堅い平面上に設置してください。次に、乳児測定用トレイをスケールの本体に図のように載せます。乳児測定用トレイがカチッと噛み合い、解除ボタンが上の位置になるまで、乳児測定用トレイを前へ引いてください。これで、乳児測定用トレイが本体にしっかりロックされています。
- 乳児測定用トレイを取り外す場合は、解除ボタンを力いっぱい押し、乳児測定用トレイを後ろにずらすだけで結構です。

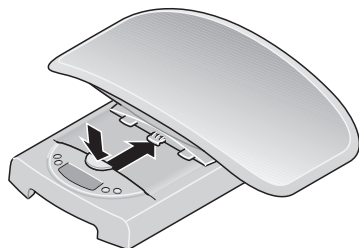

5. 操作方法

正しい計量


- スケールに何も載せないで開始ボタンを押します。ディスプレイに **SECA**、**88888**、**0.000** が順番に表示されます。これらの表示後、スケールがゼロに自動セットされ、スタンバイ状態になります。

開始

- **乳児を計量する場合**：乳児を乳児計測用トレイに載せます。乳児ができるだけ動かないようにしてください。



- **立ち上がることができる小児を計量する場合**：乳児計測用トレイを上記の説明に従って取り外します。本体が安全な状態であることを確認してください。小児をスケールに立たせ、動かないようにします。
- 計量結果をデジタルディスプレイから読み取ります。
スケールに、技術データに記載されている最大秤量より重いものを載せないでください！

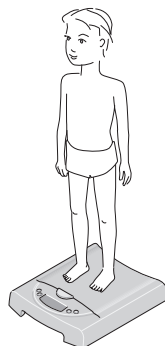

- スケールのスイッチを切るには、開始ボタンを再度押します。

開始

自動表示固定機能

重さが 1.5 kg を超えると、保持機能が自動的に有効になります。このとき、測定した体重値が安定するまでディスプレイが点滅します。そして、次回計量するときまで表示値が固定されます。ディスプレイに保持が表示されます。

- スケールにそれまで何も載せない状態で、あらためて測定を行う場合は、保持キーを押してください。

保持

自動電源オフ / 節電モード

スケールは、スイッチを入れると約 20 秒間スタンバイ状態になっています。この間に計量を行うと、スケールのスイッチが自動的に切れるまで、表示値が約 2 分間保持されます。

風袋引き機能

風袋重量（乳児計測用トレイ上の毛布やマットなど）を計量結果から差し引きたいときに、風袋引き機能が役に立ちます。これは以下の手順で行います：

- 風袋重量がスケールに載っている状態で風袋引きキーを押します。スケールのディスプレイに“0”が再セットされ、通常どおりに計量を開始できます。ディスプレイに風袋引きが表示されます。
- これで、この風袋重量でお好きな回数だけ計量を行っていただけます。
- 風袋引きキーを再度押すか、またはスケールのスイッチを切ると、風袋引き機能は無効になります。



重要！

最大風袋重量は 15 kg です。表示できる最大重量が、すでに載っている物の重量分だけ小さくなります。

各種表示機能の使用

この機能を使って個々の体重値を保存し、色々な用途に利用できます。例えば母乳摂取量を確認したり、前回計量時からの乳児の体重増加を表示させることが可能です。

- 体重値を保存するには、計量終了後、メモリを約 2 秒間押してください。ディスプレイに Δ と \square が表示されます。これで体重値が保存され、スケールのスイッチを切った後も値が維持されます。
- 続けて計量を行う場合は、メモリキーを一瞬押して、ディスプレイを各種表示（保存されている値を除いた現在の表示）に切り替えることができます。各種表示機能が有効になっていると、 \blacktriangleleft がディスプレイに表示されます。



- もう一度キーを一瞬押すと、この機能は再び無効になります。



注意事項：

新しい体重値を保存すると、これまでの保存値に上書きされます。スケールに何も載せない状態で各種表示機能を有効にすると、保存値がマイナス形式でディスプレイに表示されます。


6. お手入れ

乳児計測用トレイとスケールの外側の汚れを湿った布で拭いてください。研磨洗浄剤や酸性洗浄剤、アルコール、ベンジン、またはこれらに類する溶剤は絶対に使用しないでください！

7. こんなときは…

負荷がかかっているのに、体重が表示されないとき

- 電池が正しく挿入されているか確認してください。

 **が表示される**とき

- 電池の電圧が弱くなっています。数日以内に電池を交換してください。

bPと **が表示される**とき

- 電池が切れています。新しい電池を入れてください。

5tOP **が表示される**とき

- 最大秤量を超えています。載せた人（あるいは物）をできるだけ早く取り除き、スケールに損傷が残るのを防いでください。

8. 保守

seca社の体重計は± 20 gの精度を誇っています。この精度を今後も維持するために、本製品は慎重に設置し、定期的に保守を行ってください。当社では、ご使用頻度に応じて3年～5年の間隔で保守することをお勧めします。保守作業は、正規のメンテナンスサービスにご相談ください。不明な点については、セカ社のカスタマーサービスがお手伝いたします。

9. 技術データ

外形寸法

奥行：	330 mm
幅：	550 mm
高さ：	165 mm
重量	約 2.5 kg
温度範囲	+10 °C ~ +40 °C
最大秤量	15 kg

目量

0 ~ 10 kg	5 g
10 kg ~ 15 kg	10 g

EN 60 601-1：

電子医療機器(タイプB)：
経済産業省令適合マーク：



精度

± 20 g

文字高

22 mm

電力供給

電池

消費電流

約 30 mA

10. 廃棄処分について

本機器の廃棄処分

本機器が使用できなくなった場合は、正しく廃棄するために必要な手続きについて自治体の担当廃棄物処理課に問い合わせてください。

電池

使用済み電池は家庭ゴミとして廃棄しないでください。電池はお近くの収集場所に廃棄してください。新しい電池を購入される場合は、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、および鉛(Pb)などを含有していない、環境に適したものをお選びください。

11. 保証について

材料や製造工程に起因する不具合については、納品日より1年間の保証期間が適用されます。ただし、電池、ケーブル、電源ユニット、蓄電池といった可動部品はすべて保証対象外となります。保証の対象となる不具合は、ご購入時の領収書を提示していただければ無償で修理いたします。これ以外の請求は保証の対象とはなりません。本機器がお客様の所在地とは別の場所にある場合、往復の交通費はお客様のご負担になります。運搬中の損害で保証を請求することができるのは、運搬に純正の梱包一式を使用し、その梱包

中で本機器が発送時と同じ梱包状態で保護され、固定されていた場合のみです。そのため、すべての梱包材を保管しておいてください。

seca社から明示的に認可されていない人が本機器を開けた場合、保証は失効します。

海外に居住しているお客様が保証を請求される場合は、各国の販売店へ直接お問い合わせください。

seca株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町94

電話：043-216-0850(代表)

ファックス：043-216-0851

seca corporation

94 Sankakucho, Hanamigawaku

Chiba City, Chiba 262-0011, Japan

Phone: +81 (0) 43-216-0850

Fax: +81 (0) 43-216-0851