


## 1. 電源の確保

<乾電池をご使用の場合>

単2アルカリマンガン乾電池6本(AM2)  
(別売)をご使用ください。

ケース底面のバッテリーボックス蓋を外し、乾電池を取付け部に表示されている方向に正しく入れて蓋をしてください。乾電池の残量が少なくなると表示部が

**Lo** と▶電池交換マークを表示しますので、6本全部交換してください。

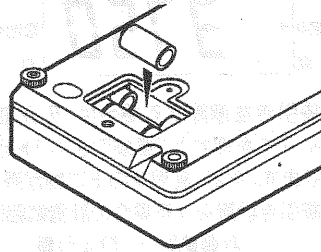

**!** 電池交換の時、計量部に過度な力が加わらないように注意してください。





ペーパークールは硬く平らな安定した場所で使用してください。じゅうたんや畳の上では正確に計測できません。温度変化の激しい状況では測定値に誤差が生じたり、液晶画面が正常に表示されない可能性があります。特に夏場の配達直後は、本体が高温になっていることがありますので数時間放置してからご使用ください。

## 2. 水平の確認

正しい計量を行うために、なるべく平らな場所で、水平器の気泡が枠の中心に来よう4ヶ所の水平調節脚を調節してください。

調節脚が浮かないように調節してください。

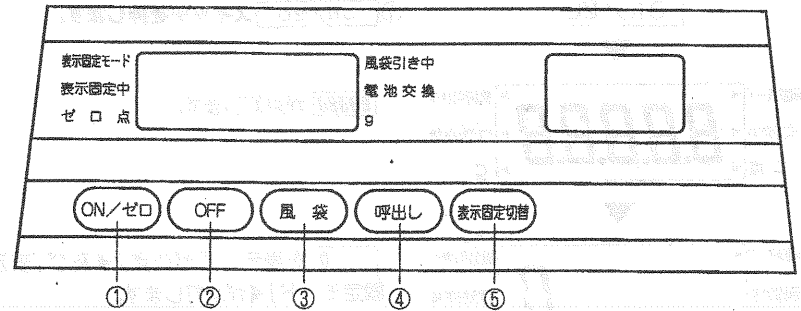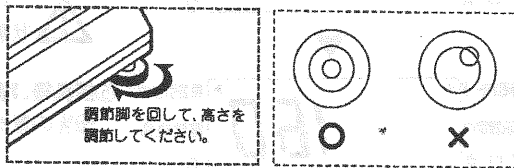

## スイッチ

- ① **ON/ゼロ** 電源をオンする時及び、ゼロリセットする時に使用します。
- ② **OFF** 電源をオフする時に使用します。
- ③ **風袋** 風袋(タオルや毛布等)引き計量をする時に使用します。
- ④ **呼出し** 表示固定解除後に押し、前回表示固定した値を約5秒間表示します。
- ⑤ **表示固定切替** このキーを押すごとに、表示固定機能のON/OFFを行います。

## 表示部マーク点灯

- 表示固定モード** ◀ 表示固定機能がONの時に点灯します。
- 表示固定中** ◀ 体重が安定すると表示が固定され点灯します。
- ゼロ点** ◀ ゼロ点が安定した時に点灯します。
- ▶ **風袋引き中** 風袋引きでご利用の際に点灯します。
- ▶ **電池交換** 乾電池の残量が少なくなると点灯します。


## ご使用方法

● 異常表示( **uuuuu** )



赤ちゃんや風袋物をのせて **ON/ゼロ** スイッチを押すと異常表示 **uuuuu** が出ることがあります。乳児皿の上に物がないことを確認の上、**ON/ゼロ** スイッチを押して **0** の表示を確認してから赤ちゃんや風袋物をのせてください。

● オーバーフロー表示( **EEEEEE** )

ひょう量を超える計量を行った時、**EEEEEE** を表示します。

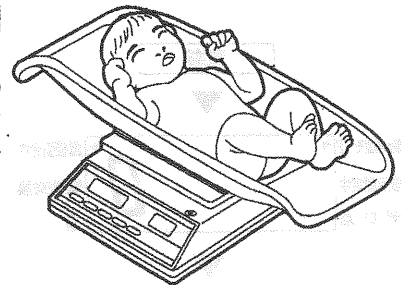

## 通常の計量 (風袋を使用しないで計量する場合)

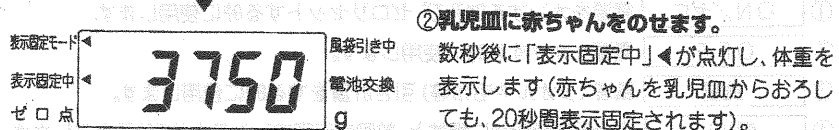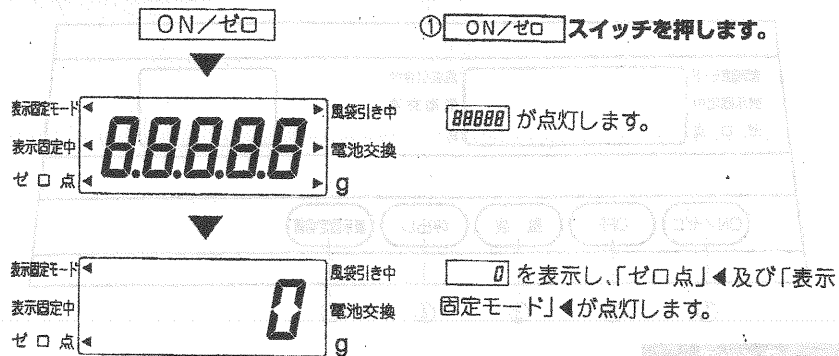



※連続して計量する場合は、赤ちゃんを乳児皿からおろし、「表示固定切替」スイッチを押して表示固定を解除し「0」の表示を確認した後、再度「表示固定切替」スイッチを押して「表示固定モード」◀が点灯してから計量してください。

※ OFF スイッチを押すと電源が切れます。

※ 1kg未満の場合、表示固定しません。

⚠ 表示固定を解除する場合は、「表示固定切替」スイッチを押してください。

## 風袋引き計量 (風袋を使用して計量する場合)

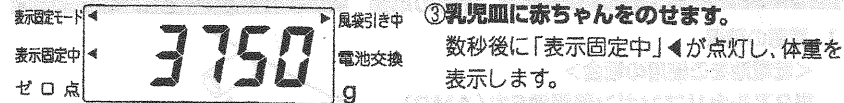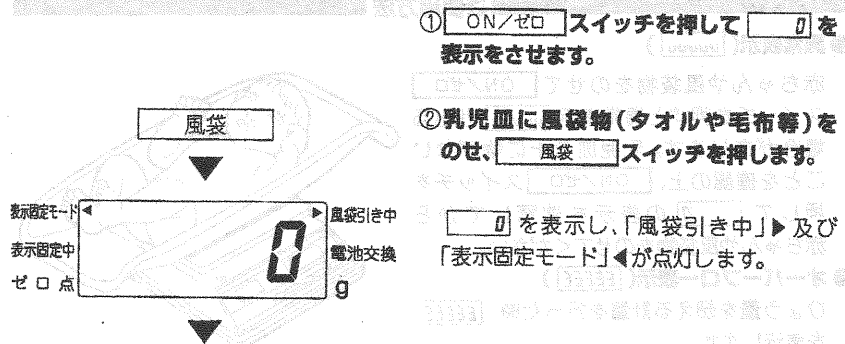


※ 風袋引きを解除する場合は、乳児皿から赤ちゃんと風袋物をおろし、「風袋」スイッチを押すと「風袋引き中」▶が消灯し、風袋量がクリアされ、表示は「0」になります。なお、乳児皿の上に物が残っている場合には、風袋量が更新されます。

※ 風袋引き計量をする場合の計量範囲は、風袋量の分だけ少なくなります。

計量範囲 = ひょう量 - 風袋量

⚠ 最大風袋量を超える風袋引きを行うことはできません(9,990g以内)。

## 母乳量の計量 (風袋引きを応用して母乳の量を計量する場合)

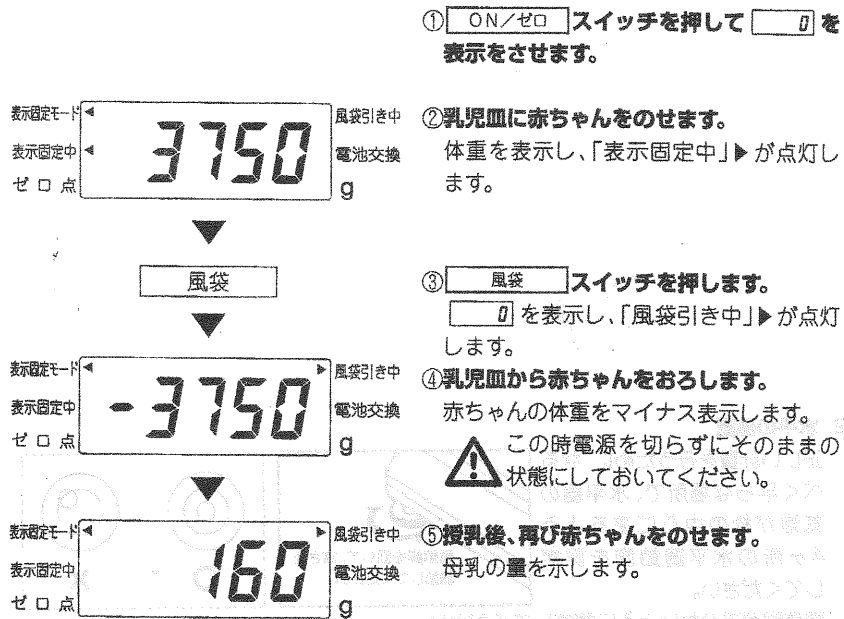

※ OFF スイッチを押すと電源が切れます。